

Le **Clamp C-Assist** introduit une méthode auto-statique pour clamper et maintenir l'utérus.

Le chirurgien peut ainsi :

- Rétracter ou élever l'utérus pour une fermeture efficace de l'incision utérine.
- Clamper un utérus hémorragique pour réduire la perte de sang.



Clamp rétracteur C-Assist

« Le clamp C-Assist s'est montré être un instrument inestimable pour le clampage et la rétraction de l'utérus lors de césariennes. Son utilisation systématique me procure un meilleur accès pour refermer l'incision utérine de manière efficace et sécurisante. J'ai observé que la compression mécanique du myomètre par le clamp a permis de réduire le taux d'hémorragie et baisser le volume de perte de sang aussi bien lors de césariennes de routine que lors d'atonie utérine post-partum. »

Dr. Stephen Staggs, MD, OB/GYN, Tennessee Women's Care, Brentwood, TN

Sangle de compression en silicone :

- S'adapte à différentes tailles d'utérus
- Se met en place rapidement lors de complications de type atonie utérine

Les mors de type Babcock sont étudiés pour stabiliser l'instrument

Inserts en silicone pour protéger les tissus

Système de cliquets pour un ajustement précis de la pression

Déverrouillage rapide des cliquets par le pouce

La poignée ergonomique augmente le levier pour une action de clampage rapide


52-1400

52-1410

52-1510

Visitez **symmetrysurgical.com** ou contactez votre distributeur local pour plus d'informations.

DESCRIPTION	CODE
Clamp rétracteur C-Assist	52-1400
Sangle de compressions – Usage unique – Boîte de 10	52-1410
Sangle de compression – Usage unique – A l'unité	52-1475
Jeu d'inserts – Usage unique – Boîte de 10 paires	52-1510

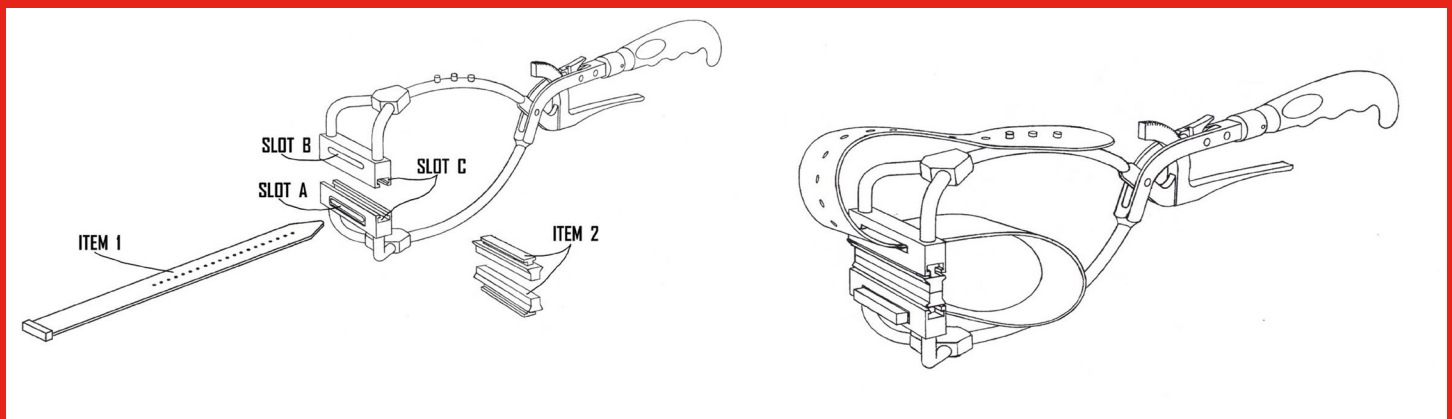

Insérez l'élément 1 (sangle de compression) à travers la fente A puis à travers la fente B comme décrit ci-dessus.

Insérez les éléments 2 (jeu d'inserts) dans les fentes C comme décrit ci-dessus

L'image ci-dessus représente l'assemblage final du clamp rétracteur C-Assist prêt à l'emploi.

Veuillez consulter le mode d'emploi pour plus d'informations.

 **symmetry surgical**
authorized distributor

 **Cormedica**

Cormedica S.A.S.
10e rue Joseph Cugnot
38300 Bourgoin Jallieu
Tel: 04 74 94 34 34
Email: contact@cormedica.fr